

Miru

1 day UpSide

Jednodniowa Silikonowo-Hydrożelowa
soczewka kontaktowa
z technologią Smart Touch™

SMART TOUCH™



Technology in balance



Z dumą prezentuje Państwu soczewkę Miru 1day UpSide

Miru 1day UpSide to pierwsza i jedyna jednodniowa silikonowo-hydrożelowa soczewka kontaktowa, w której zastosowano technologię Smart Touch™. Stanowi ona doskonałe uzupełnienie rodziny soczewek kontaktowych Miru.

SMART TOUCH™



Dlaczego warto wybrać Miru 1day UpSide z technologią Smart Touch™?

Dlatego, że wysłuchaliśmy opinii użytkowników naszych soczewek kontaktowych i wiemy, co jest dla nich ważne¹:

- czyste i bezpieczne dla zdrowia soczewki,
- bezproblemowe zakładanie soczewek.


Nowe odświeżające podejście

Stworzyliśmy markę soczewek wykonanych z nowego wysoko oddychającego i wyjątkowo miękkiego materiału, którą umieściliśmy w opakowaniu nowego typu, umożliwiającym higieniczne i bezproblemowe zakładanie.

Unikatowy nowy produkt

Soczewki kontaktowe Miru 1day UpSide z technologią Smart Touch™
Jednodniowa soczewka kontaktowa obejmująca jedyne w swoim rodzaju połączenie wysokiej przepuszczalności tlenowej, zawartości wody i modułu sztywności.

Technology in balance

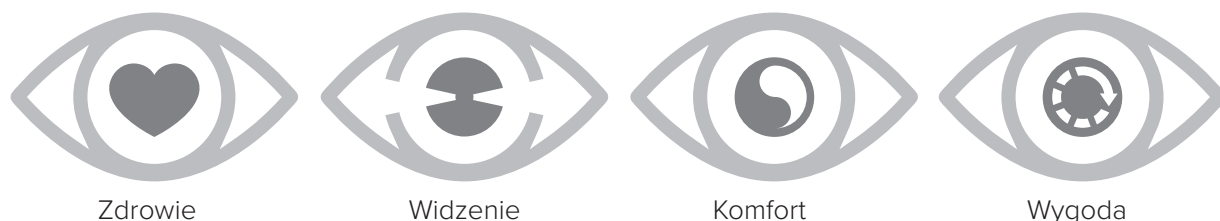

Miru 1day UpSide z technologią Smart Touch™ to jednodniowa silikonowo-hydrożelowa soczewka kontaktowa o ultra niskim module sztywności.

Materiały i technologie obróbki powierzchni

MeniSilk™ Air

Materiał silikonowo-hydrożelowy nowej generacji o niezwykle niskim module sztywności, zbilansowany dla zapewnienia zdrowia i komfortu.

- Wysoka przepuszczalność tlenowa
- Ultra niski moduł sztywności
- Zbilansowana zawartość wody
- Doskonałe nawodnienie

NanoGloss™ Pro


Niezwykle gładka powierzchnia, opracowana specjalnie z myślą o podwyższeniu komfortu soczewek wykonanych z materiału o wyjątkowo niskim module sztywności.

- Precyzja wykonania z dokładnością do nanometrów
- Niewielka siła tarcia na powierzchni
- Wysoka zwilżalność

Wszystkie korzyści ze stosowania materiału silikonowo-hydrożelowego oraz komfort materiału hydrożelowego.

MeniSilk™ Air

NanoGloss™ Pro

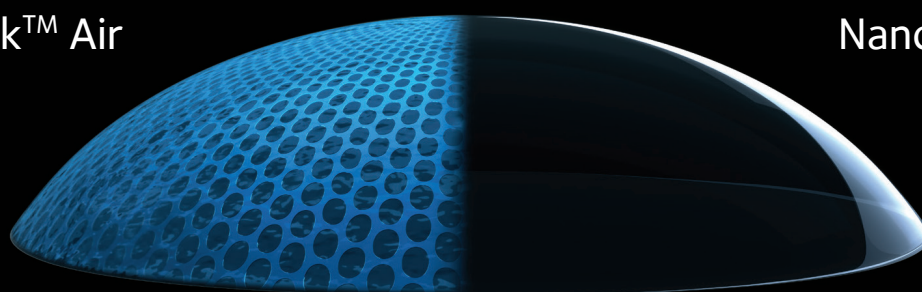

SM[^]ART TOUCH™

Na czym polega technologia Smart Touch™?

Active Compliance™

Nowe innowacyjne opakowanie sprzyjające przestrzeganiu zaleceń.

Higieniczne zakładanie soczewek

Technologię opracowano w celu ograniczenia przedostawania się za soczewkę kontaktową drażniących włosków, olejów z mydła i kremów do rąk oraz innych szkodliwych zanieczyszczeń podczas zakładania.

Nowe odświeżające podejście

80%

użytkowników twierdzi,
że chciałoby zakładać
soczewki w łatwiejszy sposób¹

- Soczewki są zawsze umieszczone właściwą stroną do góry i gotowe do założenia.
- Wyjątkowa konstrukcja i materiał soczewki pozwalają jej utrzymywać odpowiedni kształt, co ułatwia zakładanie.

Oprócz tego, zakładanie jest szybsze!

OKOŁO
50%
SZYBCIEJ

Im szybciej, tym mniej stresu!
Rano nie musisz marnować czasu na sprawdzanie, czy soczewka ustawiła się odpowiednią stroną ku górze.²



Wygoda

SM[^]ART TOUCH™

Be Smart from today


SMART TOUCH™

Wyjątkowe opakowanie, ułatwiające higieniczne założenie soczewki

Korzyści ze stosowania Smart Touch™ w porównaniu z opakowaniem konwencjonalnym

Smart Touch™

Specjalna strefa stabilizująca (Smart zone) sprawia, że wewnętrzna powierzchnia soczewki kontaktowej jest skierowana w dół. Dzięki temu soczewkę można wyjąć z opakowania i założyć bez dotykania jej wewnętrznej części.

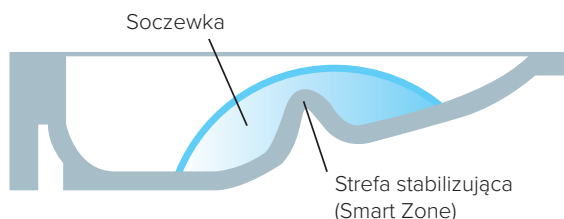


Opakowanie konwencjonalne

W konwencjonalnym opakowaniu wewnętrzna powierzchnia soczewki jest skierowana ku górze, a soczewki nie da się wyjąć z opakowania nie dotykając jej wewnętrznej powierzchni. W tej sytuacji zachodzi większe prawdopodobieństwo zanieczyszczenia soczewki.



Cztery proste etapy korzystania z technologii Smart Touch™

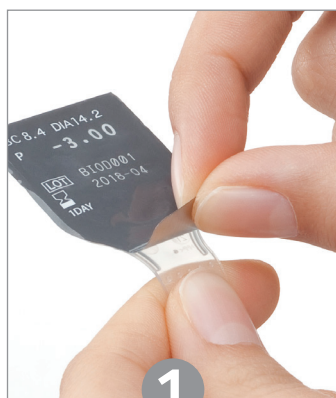

1

Otwórz

opakowanie, odrywając umieszczoną z tyłu folię ochronną.



2

Chwyc

soczewkę opuszkami kciuka i palca wskazującego.



3

Umieść

soczewkę na palcu wskazującym. Soczewka jest od razu prawidłowo ustawiona i gotowa do założenia.



4

Założ

soczewkę kontaktową na oko.




Zdrowie

Zbalansowany materiał sprzyjający zdrowiu i ochronie oka

Przepuszczalność tlenu

Oczy otrzymujące większą ilość tlenu są bielsze i pozwalają użytkownikowi nosić soczewki bez problemów od rana do wieczora.^{1,2,3}

Do trzech razy więcej tlenu w porównaniu z tradycyjnymi soczewkami hydrożelowymi

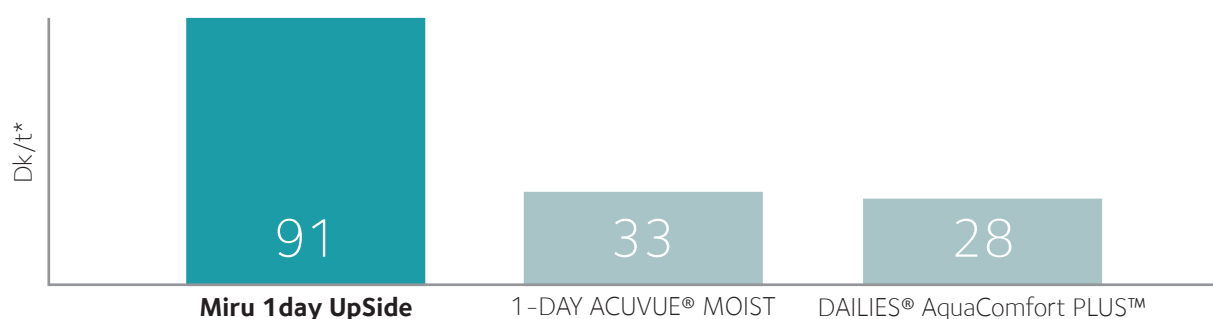


*Dk/t dla soczewki o mocy -3,00, według danych podanych przez producentów.

Ochrona

Nasze oczy potrzebują ochrony przed słońcem tak samo jak skóra.

Zintegrowana ochrona przed szkodliwym promieniowaniem UV

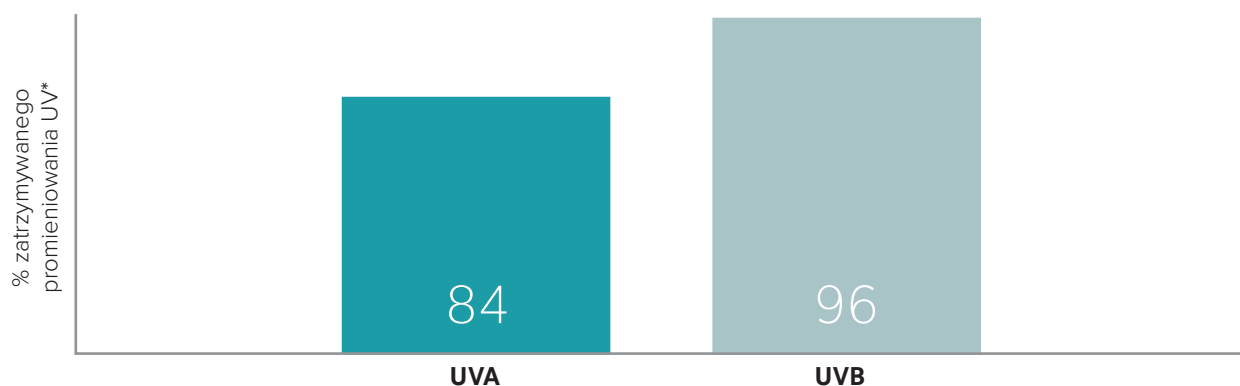

Soczewki Miru 1day UpSide są wyposażone w filtr promieniowania UV klasy 2, zapewniający ochronę przez cały rok.

* Dla soczewki o mocy -3,00 D. Dane firmy Menicon.

¹ Brennan NA, Morgan PB. Reader's Forum: Another view of oxygen transmission. Cont Lens Spectrum. Published December 1, 2005.

² Brennan N, Morgan P. Clinical highs and lows of Dk/t Pt 1. Optician 2009.

³ Optom Vis Sci. 2004 Dec;81(12):911-21. Short-term physiologic response in neophyte subjects fitted with hydrogel and silicone hydrogel contact lenses. Maldonado-Codina C, Morgan PB, Schnider CM, Efron N.


⁴ Ostrzeżenie: Soczewki kontaktowe z filtrem UV nie mogą zastępować okularów przeciwsłonecznych chroniących przed promieniowaniem UV. Oprócz soczewek należy stosować również okulary przeciwsłoneczne lub gogle ochronne z filtrem UV.



Komfort

Zbalansowana konstrukcja i materiał zapewniające optymalny komfort

Komfortowe

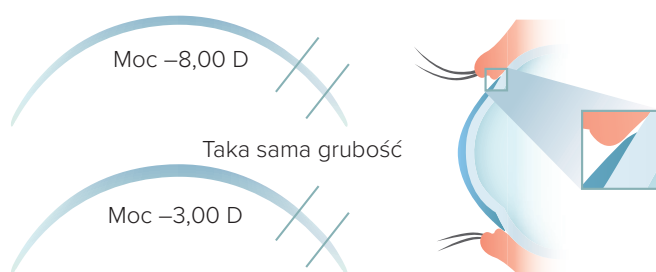


Konstrukcję soczewki dostosowano do materiału o niezwykle niskim module sztywności, co pozwala jej utrzymywać właściwy kształt i ułatwia zakładanie.

Wyjątkowy profil brzegowy (niezależnie od mocy optycznej) pozwala zachować taką samą grubość brzoza soczewki i zapobiega różnicowaniu komfortu w zależności od mocy soczewki.

Miękkie


Niezwykle niski moduł sztywności pozwala połączyć miękkość soczewki hydrożelowej z łatwością zakładania soczewki silikonowej.

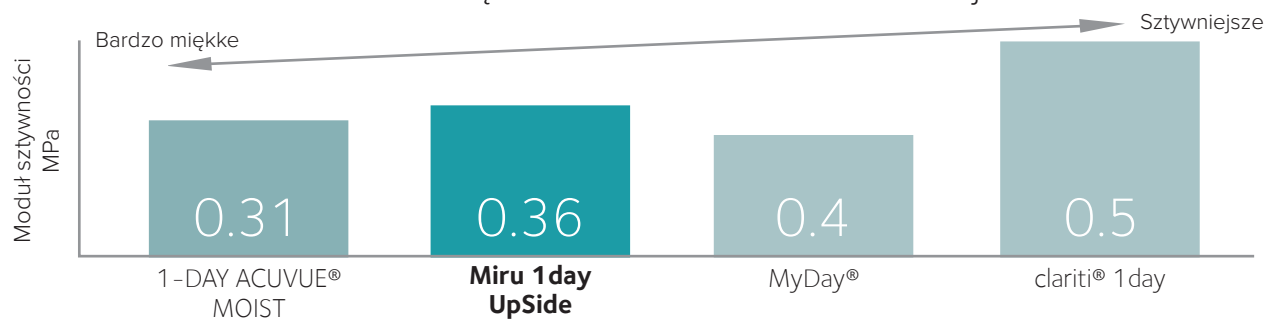

Dane podano według deklaracji producenta.

Gładkie

Powierzchnia o małym współczynniku tarcia wykonana z dokładnością do nanometrów umożliwia komfortowe noszenie soczewek przez cały dzień.

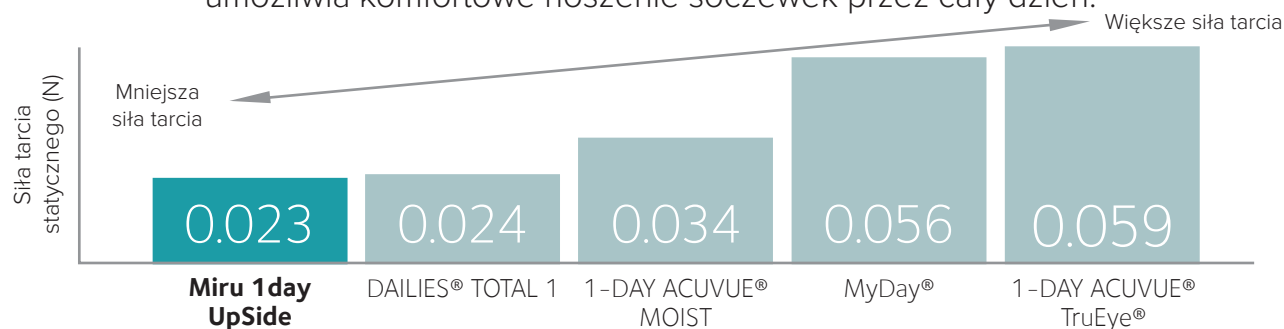

Dane firmy Menicon.

Soczewki kontaktowe Miru 1day UpSide z technologią Smart Touch™

SMART TOUCH™



Jedyne w swoim rodzaju połączenie przepuszczalności tlenowej, zawartości wody, niezwykle niskiego modułu sztywności i technologii Smart Touch™. Wyjątkowa jednodniowa silikonowo-hydrożelowa soczewka kontaktowa zapewniająca zdrowie, higienę, komfort i wygodę.

Specyfikacja produktów

Charakterystyka	Material	midafilcon A
	Zawartość wody	56%
	Dk/t przy mocy -3,00 D	$91 \times 10^{-9} (\text{cm/sek.}) \cdot (\text{mLO}_2 / (\text{mL} \times \text{mmHg}))$
	Moduł sztywności	0,36 MPa
	Grubość części centralnej	0,07 mm przy mocy -3,00 D
Charakterystyka	Krzywizna bazowa	8,40 mm
	Średnica	14,2 mm
	Zakres mocy	-0,25D do -6,00D (zmiana co 0,25)
		-6,50D do -10,00D (zmiana co 0,50)
	Filtr UV	Klasa 2
Tryb noszenia	Zabarwienie ułatwiające zakładanie	Niebieski
		Soczewka jednodniowa
Opakowanie		Opakowanie zawierające 30 szt. soczewek
		Opakowanie zawierające 5 szt. soczewek do wypróbowania

Miru 1day UpSide są produkowane przez Menicon Co., Ltd. i stanowią wyrób medyczny klasy IIa, CE 0483. Proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją użytkowania.